

뇌 신경 자기자극치료기 사용법


1. 기계 전원을 켜기 위해 콘센트 연결

2. 연결 후 기계 뒤편에 있는 전원 버튼을 켜다.



3. 환자에 맞게 Timing mode를 맞춘다.

(mode 수치 고정, 수정x)

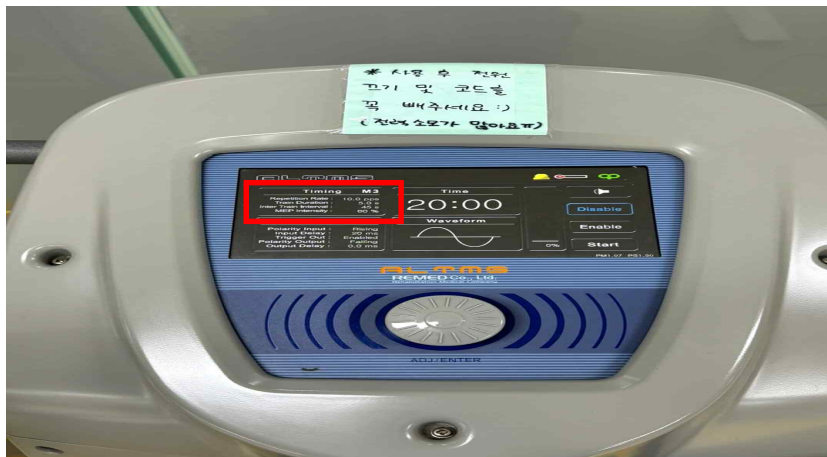

4. mode 맞춘 후 기계 head를 잡아 환자의 타점 부위에 가져가 고정한다.

(타점 부위: 줄자로 정수리와 귀 끝을 연결 후 정수리 부분에서 2~3cm 부위 타격)



5. 타점 고정 후 Enable 클릭 역치값 80% 설정



6. 설정 후 노란 버튼을 눌러 환자의 반응에 따라 역치값 조절

7. 역치값 조절 후 start 클릭 후 다시 노란 버튼 눌러서 시작
(20분간 진행)